




扫描关注官方微信
获取更多产品信息和促销活动

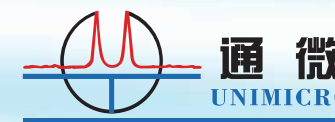

技术服务专线：
021-50801569

制备型 *EasySep[®]-3050* 液相色谱系统

新一代制备型HPLC系统, 提供液相色谱纯化解决方案



免费为用户安装、调试
一年保修、终身维护



不定期根据用户需求
举办应用技术培训



24小时提供仪器的
技术与故障咨询




帮助客户进行方案开发及
分析技术支持服务



长期优惠供应零配
件及耗材试剂

液相色谱纯化解决方案

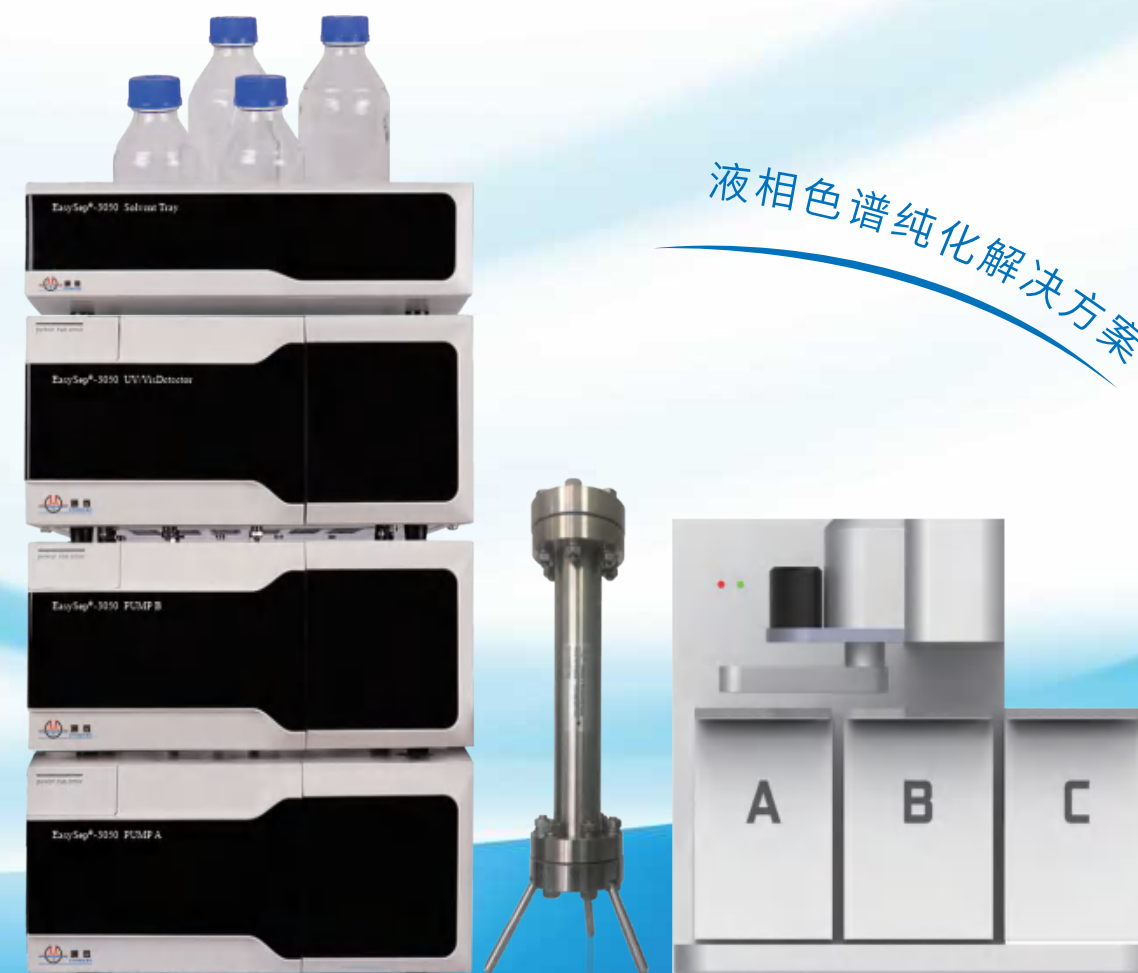

上海通微分析技术有限公司
电话: 021-38953588 38953390 38953570
邮箱: info@unimicrotech.com.cn
地址: 上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座
网址: www.unimicrotech.com.cn



Unimicro Technologies, Inc.
Tel.: 925-846-8638 Fax: 925-401-9548
Website: www.unimicrotech.com
Address: 23046 Avenida de la Carlota, Suite 600,
Laguna Hills CA 92653

Company Introduction

公司介绍

通微公司，于 2002 年成立于上海张江高科技园区，在国内拥有 3 家全资子公司，集分析仪器研发、制造、销售与服务为一体，在新型液相色谱仪器及检测器，特别是微流电动液相色谱相关领域已经取得了众多重大的开创性成果。可为您提供包括微流电动液相色谱系统、毛细管电泳仪、液相色谱仪、蒸发光散射检测器、微型质谱仪和液相色谱柱在内的多种产品及服务。

公司设有中国分析仪器行业的企业博士后工作站，是“上海市高新技术企业”、“上海市专精特新企业”、“上海市知识产权试点企业”和“浦东新区企业研发机构”，先后承担国家科学仪器重大专项、国家“九五”、“十五”科技攻关重大项目、中美、中比等国际合作项目 60 余项，在色谱领域共发表 400 余篇学术及应用论文，申请和获得 90 多项国际和中国专利。

通微公司致力于提供卓越的客户服务。于 2016 年在上海成立了通微中国客户服务中心，并在江苏、安徽、西安、河北、山东、广州等地设有分公司、办事处或客服点，构架起成熟的营销及客户服务体系，结合技术服务专线，可为客户提供周全便捷的售前售后服务。


Company Honor

公司荣誉



Product introduction

产品介绍

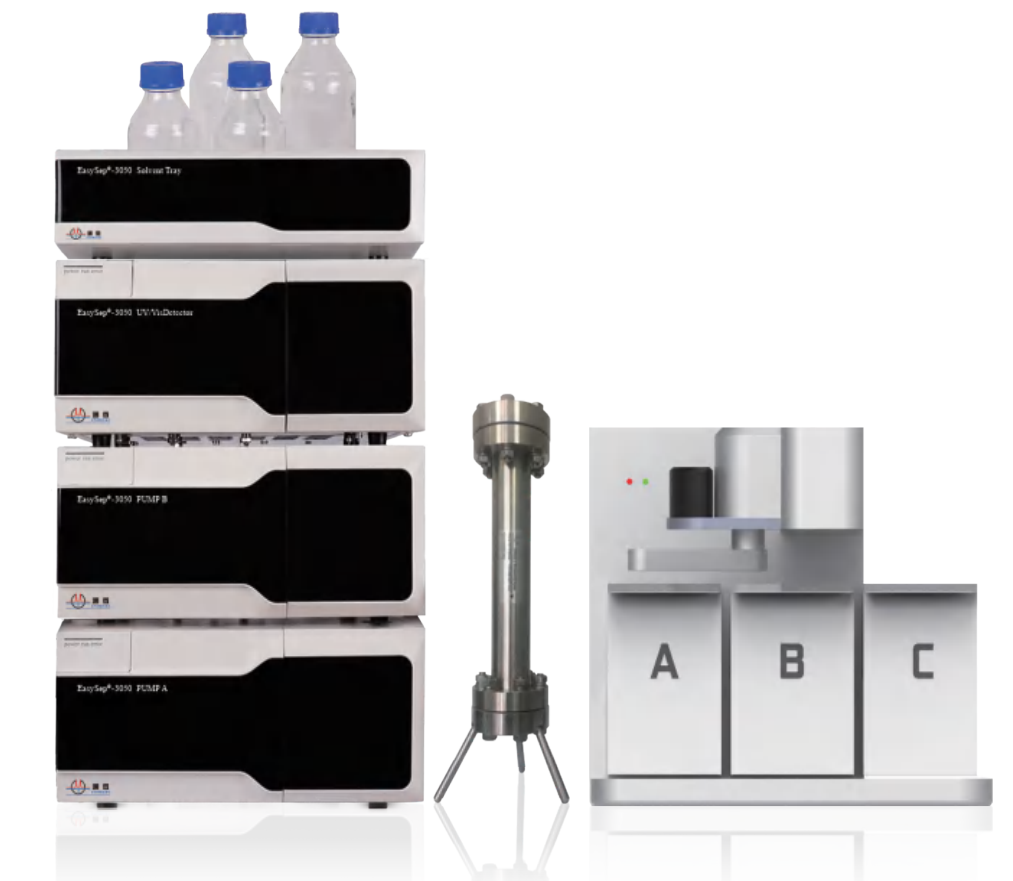

通微新一代制备型 EasySep®-3050 HPLC，采用全新的外观设计、全面提升的硬件，可以实现从分析到制备方法的完美转移，轻松实现纳克到克级的样品纯化，具有出色的样品纯化效果，为您提供液相色谱纯化解决方案。

制备型 EasySep®-3050 HPLC，采用模块化设计配置，可灵活搭配，由输液泵系统、进样系统、检测器以及馏分收集器模块组成，整机兼容通微分析型 HPLC 的数据库版色谱工作站，实现样品的全自动化分离纯化。

Product introduction

制备型 EasySep®-3050 HPLC



输液泵

- » 泵头流量50 mL/min, 实现从分析到制备方法的完美转移, 轻松实现纳克到克级的样品纯化。
- » 采用蠕动泵在线自动清洗柱塞杆, 用户可设置不同的清洗方案, 实现自动在线清洗, 延长仪器寿命。
- » 具有慢启慢停、漏液报警、超压保护、流动相低液位报警等多重安全防护措施, 确保实验顺利进行。



紫外检测器

- » 双光路光学系统, 可实现双波长同时检测, 同时具备波长时间程序和静态波长扫描功能, 满足同一样品的制备纯化检测需求。
- » 同时具备数字信号和模拟信号输出, 可友好兼容第三方软件控制。
- » 氙灯/钨灯可选, 波长范围覆盖紫外光区和可见光区, 大大拓宽应用领域。



进样系统

- » 手动进样方式、自动进样方式灵活选择, 为无人值守的自动化分离纯化提供保障。
- » 多种定量环体积可选, 满足不同量的样品纯化需求。



馏分收集器

- » 全自动馏分收集器可使用多种收集容器, 如试管、烧瓶、微孔板等, 容量从1.5 mL ~ 250 mL不等。
- » 可实现按峰/时间/体积/手动收集, 多种收集模式搭配可选, 适用于复杂组分纯化收集。
- » 采用高精度三通阀结合特殊切瓶技术, 废液通道独立, 切换瓶过程无滴漏。

Unimicro ChromStation 数据处理系统



法规依从 简单易用 数据库管理

完全符合相关法规
领先的数据分析算法

简单易用的操作流程
严格的权限管理、审计追踪功能

内置数据库, 保证数据的安全可靠
软件反控与数据采集, 让实验更高效

色谱数据处理系统是实验室工作者提高工作效率、降低成本、获得可靠实验结果的关键。Unimicro ChromStation 是通微最新推出的一套功能完备的色谱工作站软件, 可提供仪器控制、样品管理、数据采集、谱图分析、打印报告等功能, 完全符合相关国家标准, 内置数据处理友好小工具, 助力实验室工作者更轻松地工作。先进的仪器搭载全新的软件 Unimicro ChromStation, 将为您带来更准确、稳定的工作体验。

实验室样品纯化全流程解决方案

- » 标配双波长紫外-可见光检测器, 选配钨灯, 波长范围可达190 nm-800 nm, 单双模式可选。
- » UV-VIS、DAD、FLD、ELSD、MSD等多种检测器可选, 提供满足您应用要求的检测技术。
- » 可配置自动进样器、馏分收集器, 从分离检测到馏分收集均通过Unimicro ChromStation软件实现全反控, 实现无人值守的样品纯化。
- » 配套提供制备色谱柱耗材及色谱柱的重装维修服务。
- » 宽范围泵头流量覆盖, 50 mL/min (EasySep®-3050系列)、100mL/min (EasySep®-3100系列) 不同配置可选, 轻松实现纳克到克级的样品纯化。

